

ケアサンソ Focus

(フォーカス)

世界で最軽量 (約800g)
超コンパクトタイプです。



室内でも屋外でも使う場所を選びません。自宅内でのスムーズな移動を可能にし、
外出時の機会を増やすことは、酸素療法患者様の積極的な“Quality of Life”の向上を可能にします。



■標準付属品

- ACアダプタ/ケーブル
- DCケーブル (自動車用)
- DCケーブル (バッテリー用2種)
- 標準バッテリー (2個)
- バッグ2種 (本体・バッテリー)
- ショルダーベルト

■オプション



- エアベルト (外部バッテリー)

■バッテリー使用時間

同調モード	標準バッテリー使用時	エアベルト (外部バッテリー)
17.5mL/1吸気 (最大35BPMまで同調)	1時間30分/個	4時間

*1 合計最大使用時間: 1時間30分+1時間30分+4時間=7時間

★バッテリー交換時は一旦電源がオフになります。

※バッテリー使用可能時間は使用される環境により異なります。表示されている数値はあくまでも目安です。

■仕様

酸素濃度	90%+5.5%/-3%
流量 (固定)	1吸気あたり17.5mL 3~35BPMで同調
寸法	123(W)×64(D)×191(H)mm
重量	0.8kg
定格電源電圧	AC100V*2 50/60Hz, DC11~16V 電源 (車用)
標高	3048m以下

*2 AC100-240V

一般的名称: 酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ 製造販売認証番号: 226ADBZX00008000 医療機器分類: 管理医療機器、特定保守管理医療機器

1吸気あたり **17.5 mL**

標準バッテリー
使用時 (最大) **1時間30分**

エアベルト
(外部バッテリー) 併用時 **7** (最大)*1
時間

CAIRE®

製造販売元

ケアメディカルジャパン株式会社

愛知県安城市三河安城本町2-7-13

Tel: 0566-91-1670 Fax: 0566-91-1675

製造元 CAIRE Inc. (ケアーインク) アメリカ合衆国

- 仕様は改良のため、予告なしに変更となることがございます。
- ご使用に際しては、必ず製品に付属の添付文書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

撮影協力: 大阪マリオット都ホテル

※一部画像は、加工処理して使用しています

2021-04CS-III 2000

CAIRE®

次世代型 酸素濃縮装置

ケアサンソ Series

“Quality of Life”

ケアサンソシリーズは患者様の
積極的なQOL向上を応援します。



- 在宅から通院・通勤・通学に
- さらに国内外の旅行も対応
- 災害・緊急時に対応

ケアサンソシリーズは、
航空機内で使用できます。



ケアサンソ Eclipse / ケアサンソ Focus / ケアサンソ FreeStyle / ケアサンソ FreeStyle 5

ケアサンソ Eclipse

(エクリプス)

トランスポータブル酸素濃縮装置の ワールド・スタンダード



世界で最も実績のあるトランスポータブル型酸素濃縮装置です。

オートSAT™ 機能搭載

■仕様

酸素濃度	88%以上
流量設定 連続	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0L/分 (6段階)
オートSAT	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 128, 160, 192 (14段階)
ライスタイム	3段階 (急・中・緩)
トリガー感度	3段階 (-0.135cmH ₂ O ~ -0.37cmH ₂ O)
寸法	310(W)×180(D)×490(H)mm
重量	8.35kg (バッテリー含む)
電源	AC100-240V 50/60Hz DC12V バッテリー 97.5W・Hr
最大消費電力	145Watt
使用可能標高	0-4,000m

一般的名称: 酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ 製造販売認証番号: 226ADBZX00219000
医療機器分類: 管理医療機器、特定保守管理医療機器

■標準付属品/オプション

標準付属品	 専用カート	 ACアダプタ	 ACケーブル
	 DCアダプター (自動車用)	 バッテリー	
オプション	 デスクトップチャージャー	 トラベルキット	

オートSAT™ (同調モード)	バッテリー使用時間
1L/分相当 (16mL/回)	5時間24分
3L/分相当 (48mL/回)	4時間54分
6L/分相当 (96mL/回)	3時間30分

※バッテリー使用時間は使用される環境により異なります。表示されている数値はあくまでも目安です。


■主な特徴 3L/分連続流量とオートSAT™(世界初)の機能

オートSAT™は患者様の呼吸の状態を検知し、呼吸のタイミングに合わせて適切な量の酸素を供給する新しい機能です。

- 吸気を検知できない場合 (トリガー不検知) 自動的に連続供給モードに切り替わります。
- 労作時は呼吸回数を常時モニターすることによりもっとも適切な状態で酸素を供給します。
- 吸気能力に合わせたトリガー感度 (3段階) と酸素吐出パターン (3段階) を設定することができます。
- 在宅での据置型酸素濃縮装置として連続フロー3L/分 (最大) として使用できます。
- 連続流とオートSAT™への切り替えがいつでも自由に選択できます。
- 小型・軽量設計により居室内での装置の移動が容易にできるため、
わずらわしい延長チューブから解放されます。



オートSAT™モードと通常同調式装置の比較

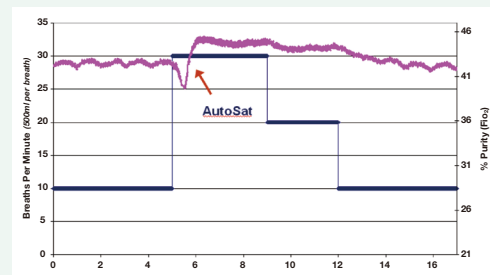

オートSAT™

14段階同調機能により安定したFiO₂の維持が可能

最大連続酸素流量 **3L/分**

※連続モード・0.5-3.0L/分の6段階

バッテリー
使用時間(最大) **5時間24分**

ケアサンソ FreeStyle

(フリースタイル)

3段階の同調モードに対応



わずらわしい延長チューブから解放されます。

3電源方式により散歩や屋外での作業、通勤、通学などに利用でき、患者様の積極的なQOL向上に貢献します。



**3電源方式
(AC・DC・BATT) により
使用場所を選びません**

■標準付属品

- ACアダプタ/ケーブル
- DCケーブル (自動車用)
- キャリーバッグ
- ショルダーベルト

■オプション




- デスクトップチャージャー
- リュック

■標準付属品

- ACアダプタ/ケーブル
- DCケーブル (自動車用)
- キャリーバッグ
- ショルダーベルト

■オプション

- 

- デスクトップチャージャー
 - リュック

■バッテリー使用時間

同調モード	8.75mL	17.50mL	26.25mL
標準バッテリー使用時	6時間30分	3時間50分	3時間

※バッテリー使用可能時間は使用される環境により異なります。表示されている数値はあくまでも目安です。

■仕様

酸素濃度	90%+5.5%/-3%
同調モード設定	①8.75 ②17.50 ③26.25mL (3段階)
寸法	155(W)×91(D)×218(H) mm
重量	2.2kg
定格電源電圧	AC100-240V 50/60Hz, DC12V 電源(車用)
使用高度	3,658m 以下

同調モード **3段階**

標準バッテリー使用時(最大) **6時間30分**

ケアサンソ FreeStyle 5

(フリースタイル 5)

5段階の同調モードに対応



わずらわしい延長チューブから解放されます。

3電源方式により散歩や屋外での作業、通勤、通学などに利用でき、患者様の積極的なQOL向上に貢献します。



**3電源方式
(AC・DC・BATT) により
使用場所を選びません**

■標準付属品

- ACアダプタ/ケーブル
- DCアダプタ (自動車用)
- キャリーバッグ
- ショルダーベルト

■オプション




- デスクトップチャージャー
- リュック

■標準付属品

- ACアダプタ/ケーブル
- DCアダプタ (自動車用)
- キャリーバッグ
- ショルダーベルト

■オプション

- 

- デスクトップチャージャー
 - リュック

■バッテリー連続使用時間

同調モード	8.75mL	17.50mL	26.25mL	35.00mL	43.75mL
標準バッテリー使用時	4時間15分	2時間30分	1時間45分	1時間30分	1時間15分

※バッテリー使用可能時間は使用される環境により異なります。表示されている数値はあくまでも目安です。

■仕様

酸素濃度	90%+5.5%/-3%
同調モード設定	①8.75 ②17.50 ③26.25 ④35.00 ⑤43.75mL (5段階)
寸法	168(W)×112(D)×272(H)mm
重量	3.0kg
定格電源電圧	AC100-240V 50/60Hz, DC12~24V 電源(車用)
使用高度	3,658m 以下

同調モード **5段階**

標準バッテリー使用時(最大) **4時間15分**

一般的名称: 酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ 製造販売認証番号: 225ADBZX00201000 医療機器分類: 管理医療機器、特定保守管理医療機器